

Ovulační test OVULAR DESTPHARM



Kat. č.: DP-L3 (2,5mm-6,0mm)
Jednostupňový ovulační test moči Ovular je kvalitativní test používaný k předpovědi, kdy nastává zvýšení LH a kdy budete mít tedy pravděpodobně ovulaci.
Pouze pro použití k provedení testu in vitro u sama sebe. Pouze k jednému použití.

JAK TEST FUNGUJE?

Hladina LH (lutalizační hormon), který je za normálních okolností v moči nízký přibližně, se uprostřed menstruačního cyklu výrazně zvýší. Zvýšení LH spouští ovulaci, což je doba, kdy se objeví u plodných žen pravděpodobně ovulace. Ovulační cyklus LH je společným způsobem zjištění ovulace. Ovulace nastane 24-48 hodin po pozitivním výsledku testu. Při porušení pokynů do vorku moči prochází vorkem díky kapilárnímu působení membránou. Jakmile LH ve vorku dosáhne oblasti testovací zóny membrány, vytvoří barevnou čáru. Neplnostnost zóny barevné čáry znamená negativní výsledek. Pokud byl test proveden správně, objeví se v oblasti kontrolní zóny barevná čára, která slouží jako kontrola správného postupu. Testovací proudek zjeví ovulaci v vysokých stupních testu. Je to černý nálepkový označení ovulace, protože určuje období, kdy se barví vajíčko a spermie setkají za nejlepších podmínek. Ovulace může být nepravděpodobná v období nízkých aktivit, emoci a dalších faktorů v životě. Nemůžete předpokládat, že ovulace nastane vždy ve stejnou dobu po menstruaci. Proto musíte test v každém menstruačním cyklu provádět znovu.



OBŠAH TESTOVACÍ SADY

- Dva sáčky obsahující proudek a vysoušecí prostředek. Vysoušecí prostředek slouží pouze ke skladování účelům a při testování ¹⁴ nepoužívá.
- Leták s pokyny k použití.

CO JEŠTĚ POTŘEBUJETE?

- Čistou suchou plastovou nebo skleněnou nádobku na odber moči.
- MŘNŽ ČAS (hodiny nebo hodiny).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tato sada je určena pouze k záměrnému použití. Nepoužívejte ji. Po prvním použití zlikvidujte, můžete vyhodit do domovního odpadu. Testovací proudek lze použít pouze jednou.
- Nepoužívejte testovací sadu po datu expirace.
- Pokud je obal porušený nebo nedokonalé uzavřený, sadu nepoužívejte.
- Ukládáte mimo dosah dětí.

3+ = první den menstruačního cyklu
12H = den, kdy začít testovat (10. den)

SKLADOVÁNÍ A STÁLOST

- Skloďte při 4 °C až 30 °C v neporušeném obalu do data expirace.
- Chraňte před přímým sluncem, vlhkem a teplem.
- NEZMAZUJTE.
- Obal otevřete nejpozději až těsně před provedením testu.

ODBER VZORKU A PŘÍPRAVA

KDY ODBERAT VZOREK MOČI PRO TESTOVÁNÍ?

Pro provedení třetihodinového testu se hodí jakýkoli vorek moči.

JAK ODČERPAT MOČ?

Vzorek moči lze odebrat do jakéhokoli čistého suchého plastového nebo skleněného nádobky.

KDY ZAČÍT TESTOVAT?

Délka menstruačního cyklu je doba od prvního dne menstruačního krvácení do dne před začátkem následujícího krvácení. V níže uvedeném tabulce si zjistíte délku menstruačního cyklu. V níže uvedeném tabulce si zjistíte, kdy máte začít testovat. Pokud je váš menstruační cyklus kratší než 21 dní nebo delší než 38 dní, poraďte se se svým lékařem. Pokud nemáte délku svého menstruačního cyklu, můžete začít testovat 11 dní po své první menstruaci, protože průměrná délka menstruačního cyklu je 28 dní. Provéďte každý den jeden test po dobu 5 dní, nebo dlouze nejpozději zvýšení hladiny LH.

Délka cyklu	Den cyklu pro začátek testování
21 dní	5. den
22 dní	6. den
23 dní	7. den
24 dní	8. den
25 dní	9. den
26 dní	10. den
27 dní	11. den
28 dní	12. den
29 dní	13. den
30 dní	14. den
31 dní	15. den
32 dní	16. den
33 dní	17. den
34 dní	18. den
35 dní	19. den
36 dní	20. den
37 dní	21. den
38 dní	22. den
39 dní	23. den
40 dní	24. den

Příklad: Pokud váš normální menstruační cyklus trvá 26 dní, uvidí tabulka, že testování má začít 10. den. Následující kalendář uvidí, jak určit 10. den.


Příklad kalendáře

1	2	3+	4	5	6	7
8	9	10	11	12H	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

3+ = první den menstruačního cyklu
12H = den, kdy začít testovat (10. den)

JAK PROVÁDĚT TEST?

- Testovací proudek k moči musejí být před testováním v pokojové teplotě (15–30 °C).
- Vyjměte z neporušeného obalu testovací proudek.
- Poraďte proudek do moči lžičkou směrem k moči. Po 3 sekundách proudek vyjměte a položte ho vodorovně na čistou suchou povrch (například na hrlo nádobky k moči).
- ČOČTEŽ LHCZOVNÍ: Dbejte, aby hladina moči nepřekročila zónu MAX (vyšší značka), jinak test nebude fungovat správně. Za 5 minut odečtěte výsledek. Neodčítájte výsledek po více než 5 minutách.

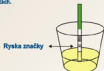


JAK ODEČTĚT VÝSLEDKY?

Neuvěřitelné hladiny LH. V kontrolní zóně se objeví pouze čára kontrolní barvy nebo se testovací čára objeví, ale je světlejší než kontrolní čára. Znamená to, že hladina LH není zvýšená.

Zvýšené hladiny LH. Pokud jsou vidět dvě barevné čáry a testovací čára je stejně nebo tmavší než kontrolní čára, nastane pravděpodobně v následujících 24–48 hodinách ovulace. Pokud se snažíte otěhotnět, je nejvhodnější doba pro pokusit se o otěhotnění 24–48 hodin, ale dříve než za 48 hodin.

Negativní výsledek: Nejnovější výsledek: žádná čára nebo je vidět pouze čára v testovací oblasti, ale nikoli v kontrolní oblasti. Zopakujte test s novou testovací sadou. Pokud se test opět nepodaří, kontaktujte distributora nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili, a uveďte číslo šarže.

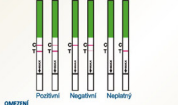

OMEZENÍ

- Test funguje pouze tehdy, když je přesně dodržen testovací postup.

VÝZNAM SYMBOLŮ NA OBALU

	Pozor! Čtěte pečlivě návod k použití		Použít testů v teple		Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte na suchém místě.
	Pouze k použití in vitro		Spotřebujte do		Nepoužívejte opakovaně
	Skloďte mezi 4 °C a 30 °C		Číslo šarže		Zástupce v ES Výrobce

Core Technology Co., Ltd.
Room 100, C Building,
No.29 Life Park Rd., Changping
District, Beijing, 102206 China

Wellking Ltd t/a Wellking Tech
Consulting Suite B, 29 Harley Street
London W1G 9QR, England,
United Kingdom

DISTRIBUTOR PRO ČR SR a PL:
DESTPHARM s.r.o.,
Lesní 858, 39201 Soběslav
www.destpharm.cz

Version 01/02/2012

Ovulační test OVULAR DESTPHARM



Kat. č.: DP-L3 (2,5mm-6,0mm)

Jednostupňový ovulační test moči Ovular je kvalitativní test používaný na předpověď, kdy nastává zvýšení LH a kdy budete mít tedy pravděpodobně ovulaci.
Při použití při výkonu testu in vitro u samy sebe, i ba na vonkách použít.

AKO TEST FUNGUJE?

Hladina LH (lutalizační hormon), který je za normálních okolností v moči nízký přibližně, se uprostřed menstruačního cyklu výrazně zvýší. Zvýšení LH spouští ovulaci, což je doba, kdy se objeví u plodných žen pravděpodobně ovulace. Ovulační cyklus LH je společným způsobem zjištění ovulace. Ovulace nastane 24–48 hodin po pozitivním výsledku testu.

Při porušení pokynů do vorku moči prochází vorkem díky kapilárnímu působení membránou. Když LH ve vorku dosáhne oblasti testovací zóny membrány, vytvoří barevnou čáru. Neplnostnost zóny barevné čáry znamená negativní výsledek. Pokud byl test vykonán správně, objeví se v oblasti kontrolní zóny barevná čára, která slouží jako kontrola správného postupu. Testovací proudek zjeví ovulaci v vysokých stupních testu. Je to černý nálepkový označení ovulace, protože určuje období, kdy se barví vajíčko a spermie setkají za nejlepších podmínek. Ovulace může být nepravděpodobná v důsledku nízkých aktivit, emoci a dalších faktorů v životě. Nemůžete předpokládat, že ovulace nastane vždy v rovnaký čas po menstruaci. Proto musíte test v každém menstruačním cyklu vykonávat znovu. Uchovávejte kontrolní zónu Testovací zóna čára matměrně úroveň Koniec vzorky

OBŠAH TESTOVACÍ SÚPRAVY

- Dve vrecká obsahujúce prútok a prostriedok na vysušenie. Prostriedok na vysušenie slúži iba na skladovacie účely a pri testovaní sa nepoužíva.
- Letáček s pokynmi pre použitie.

ČO JEŠTĚ POTŘEBUJETE?

- Čistou suchou plastovou nebo sklenou nádobku na odber moči.
- Zariadenie na meranie času (hodiny alebo hodiny).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Tato súprava je určená iba na vonkajšie použitie. Nepoužívajte ju. Po prvom použití zlikvidujte, môžete vyhodit do domového odpadu. Testovací prútok možno použiť iba raz.
- Nepoužívajte testovaciu súpravu po dátume expirácie.
- Pokiaľ je obal porušený alebo nedokonalé uzavretý, súpravu nepoužívajte.
- Ukladajte mimo dosahu detí.

SKLADOVÁNÍ A STÁLOST

- Skloďte pri teplote 4 °C až 30 °C v neporušenom obale do dátumu expirácie.
- Chraňte pred priamym slnkom, vlhkom a teplem.
- NEZMAZUJTE.
- Obal otvorte najneskôr až tesne pred vykonávaním testu.

ODBER VZORKU A PŘÍPRAVA

KDY ODČERPAT VZOREK MOČI NA TESTOVÁNÍ?
Vzorek moči lze odebrat do jakéhokoli čistého suchého plastového nebo skleněného nádobky.

AKO ODČERPAT MOČ?

Vzorek moči lze odebrat do jakéhokoli čistého suchého plastového nebo skleněného nádobky.

KDY ZAČÍT TESTOVAT?

Délka menstruačního cyklu je doba od prvního dne menstruačního krvácení do dne před začátkem následujícího krvácení. V níže uvedeném tabulce si zjistíte délku menstruačního cyklu. V níže uvedeném tabulce si zjistíte, kdy máte začít testovat. Pokud je váš menstruační cyklus kratší než 21 dní nebo delší než 38 dní, poraďte se se svým lékařem. Pokud nemáte délku svého menstruačního cyklu, můžete začít testovat 11 dní po své první menstruaci, protože průměrná délka menstruačního cyklu je 28 dní. Provéďte každý den jeden test po dobu 5 dní, nebo dříve než zvýšení hladiny LH.

délka cyklu	Den cyklu pro začátek testování
21 dní	5. den
22 dní	6. den
23 dní	7. den
24 dní	8. den
25 dní	9. den
26 dní	10. den
27 dní	11. den
28 dní	12. den
29 dní	13. den
30 dní	14. den
31 dní	15. den
32 dní	16. den
33 dní	17. den
34 dní	18. den
35 dní	19. den
36 dní	20. den
37 dní	21. den
38 dní	22. den
39 dní	23. den
40 dní	24. den

Příklad: Pokud váš normální menstruační cyklus trvá 26 dní, uvidíte tabulku, že testování má začít 10. den. Následující kalendář uvidíte, ako určit 10. den.

Příklad kalendáře

1	2	3+	4	5	6	7
8	9	10	11	12H	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

3+ = první den menstruačního krvácení
12H = den, kdy začít testovat (10. den)